

# riva luting plus

RESIN REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT

CEMENTO SELLANTE DE RESINA REFORZADA CON IONOMEROS DE VIDRIO

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESINOSO

CEMENT SZKŁO-JONOMEROWY MODYFIKOWANY ŻYWICĄ DO OSADZANIA PRAC PROTETYCZNYCH

KUNSTSTOFF VERSTÄRKERTER GLASIONOMER BEFESTIGUNGSZEMENT

VERRE IONOMERE POUR SCELLEMENT, RENFORCE EN RESINE

CEMENTO VETROIONOMERICO PER FISSAGGIO RINFORZATO CON RESINA

RESIN VERSTERKT GLASIONOMEER LUTING CEMENT

RESINMODIFIERAD GLASJONOMERTÄTNINGSCEMENT

RESIN MODIFICERET GLASIONOMER LUTING CEMENT

RESIINIMUUNNELTU LASI-IONOMEERISEMENTTI

RESINMODIFISERT GLASSIONOMER LUTING SEMENT

ΡΗΤΙΝΩΔΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

REZİN BAZLI CAM İONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

ŽIVICÍ NAPLNĚNÝ SKLOIONOMERNÍ LUTING CEMENT

CIMENT IONOMER DE STICLA, IMBUNATATIT CU RASINA, PENTRU CIMENTARI

ГЛАС ЙОНОМЕРЕН ЦИМЕНТ МОДИФИЦИРАН СЪС СМОЛА

ŽIVICOU NAPLNENÝ SKLOIONOMERNÝ LUTING CEMENT

MŰGYANTÁVAL MEGERŐSÍTETT ÜVEGIONOMER RAGASZTÓ CEMENT

歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント

레진강화형 글래스이오노머 루팅시멘트



SDI

# 레진강화형 글래스아이오노머 루팅시멘트



## riva luting plus




Riva Luting Plus 는 메탈, PFM, 레진 크라운, 브릿지, 인레이, 온레이 및 세라믹 인레이, 크라운에 적용 가능한 자가중합용 레진강화형 글래스아이오노머 루팅시멘트입니다. 덴틴, 에나멜 및 모든 종류의 코어재료에 화학적으로 결합을 합니다.

### 특허받은 ionglass 필러

Riva Luting Plus 는 ionglass 연구원들에 의해 개발된 SDI 특허 ionglass™ 필러를 사용합니다. ionglass™은 SDI의 모든 치과용 시멘트에 사용되며 높은 불소방출과 방사선불투과성을 가진 반응성 glass입니다. Riva Luting Plus는 불소방출이 매우 높아 자연치아의 재광화에 도움을 줍니다


### 매우 우수한 불소방출

Riva Luting Plus 의 불소가 치아 주변에서 자유롭게 이동하여 자연치아에 많은 이점들을 제공합니다. 불소는 치아우식예방에 아주 중요한 역할을 합니다. Fluorapatite 를 형성하여 Hydroxyapatite 보다 산에 대한 저항력이 우수하며, 치아 재광화에도 매우 중요합니다.

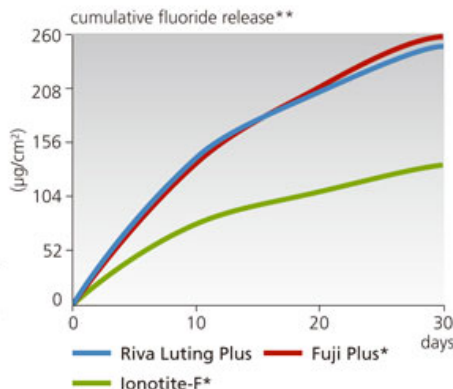



### 불용해성

Riva Luting Plus 는 세팅 시 물에 용해가 되지 않아, 매우 낮은 산부식성 수치를 가지고 있습니다. 그러므로 구강 내 산에 의해 마모되거나 분해되지 않아 수복물의 수명을 향상시켜줍니다. ISO 기준에서도 산부식성이 0.17mm 를 넘지 말라고 지시하고 있습니다.

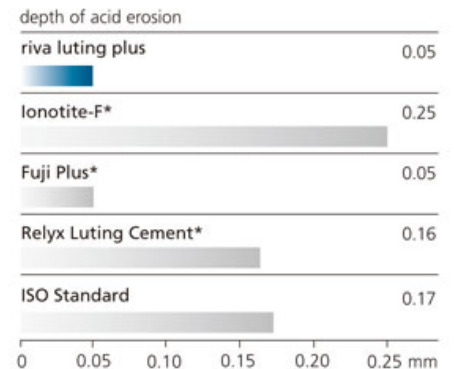


### 우수한 본딩강도

자연치아의 적당한 본딩강도는 수복물의 장기간 수복에 매우 중요합니다. Riva Luting Plus 는 덴틴과 지르코니아 뿐만 아니라 세라믹 크라운과 인레이에도 매우 우수한 본딩력을 가지고 있습니다.

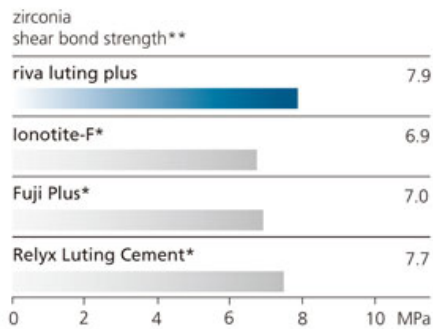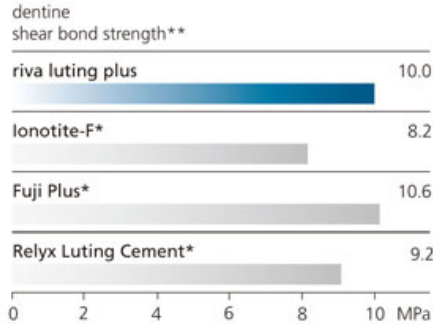

### 세팅타임

Riva Luting Plus 사용 시, 워킹타임의 손실이 거의 없습니다. 적당한 워킹타임과 빠른 세팅타임을 가지고 있기 때문에 체어타임을 줄여주고 저작압에 빠른 저항성을 보여줍니다.

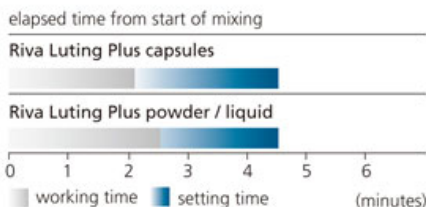


### No Bisphenol A or derivatives

Riva Luting Plus 는 Bisphenol A 와 그 부산물을 포함하고 있지 않습니다. 환자에게 편안하게 사용하십시오.


### 굴곡강도

Riva Luting Plus 는 우수한 굴곡강도를 가지고 있어, 저작 시 Crack 과 깨짐이 발생하지 않아 수복물이 오래갑니다.

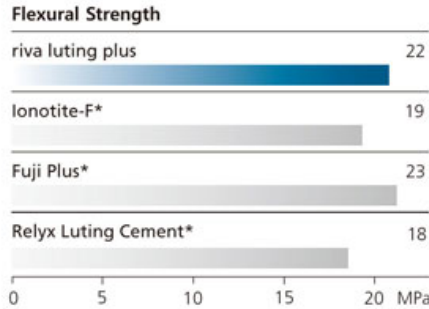

### 매우 낮은 필름두께

Riva Luting Plus 는 프렙부위에 빠르게 흘러 들어갑니다. 낮은 필름두께를 가지고 있어 Indirect 수복물을 완벽하게 fitting 할 수 있습니다.

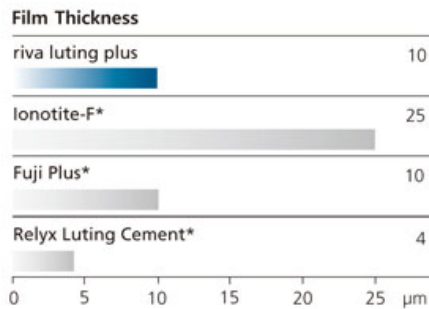

### 용도

- 레진, 메탈, PFM 인레이, 온레이, 브릿지 크라운 접착
- 세라믹 인레이, 크라운 접착
- 핀, 포스트, 스크류 접착

### 하나의 심플한 색상

Riva Luting Plus 는 Universal light yellow 웨이드로 이용 가능합니다.


## 사용방법

크라운 접착 시


- 1 치아를 격리시키고 프렙하십시오. Riva Conditioner 를 10초 동안 혹은 Super Etch 37% 인산에칭을 5초 동안 적용하십시오. 깨끗이 닦고 Dry 시키십시오.




- 2 적용할 수복물 내부의 표면이 제조사의 지시에 따라 깨끗하고, 잘 Dry 되어 있는 지 확인하십시오.

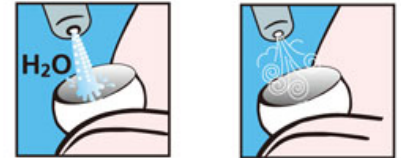

- 3 캡슐을 꺼내서 캡슐혼합기에 즉시 혼합하십시오. 중요: 혼합 전 어플리케이터로 캡슐을 터트리지 마십시오.

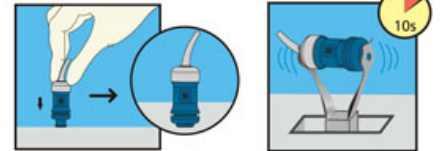


- 4 즉시 캡슐을 어플리케이터에 넣고 페이스트가 노즐을 통해 보일 때까지 방아쇠를 당기십시오.(약 3회)

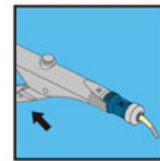

- 5 본딩할 표면에 대략 1cm 의 시멘트를 가볍게 짜내십시오.



- 6 혼합을 끝낸 후 30초 내에 수복물을 위치시키십시오.

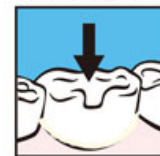

- 7 Excess 시멘트가 젤 타임으로 되었을 때 기구를 이용하여 깨끗하게 제거하십시오.(혼합 시작 후 약 2분)



- 8 완전히 세팅 될 때까지 격리시키십시오. (혼합시작 후 약 4분 30초)



# riva luting plus



\* Ionotite-F, Fuji Plus and Relyx Luting Cement are not the registered trademarks of SDI Limited.

\*\* Published and SDI Test Data.



## Riva Luting Plus Capsules

50 Riva Luting Plus capsules  
Reorder 8651008

## Riva Luting Plus Powder / Liquid Kits

10g (8.95mL) Liquid bottle  
25g Powder jar  
accessories  
Reorder 8651508

## Riva Luting Plus Liquid Refill

10g (8.95mL) bottle refill  
Reorder 8651900

## Riva Luting Plus Powder Refills

25g Powder refill  
Reorder 8651108

## Riva Conditioner

10mL bottle refill  
Reorder 8620001



Riva Applicator 2  
Reorder 5545013

Riva Applicator  
Reorder 5545009

Made in Australia by SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Germany 0800 100 5759

Ireland 01 886 9577

Italy 800 780625

New Zealand 0800 734 034

Spain 00800 022 55 734

United Kingdom 00800 022 55 734

USA & Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au



경기도 고양시 덕양구 중앙로 542  
세신훼미리타운 910호.

Tel. 031-938-2504. Fax. 031-938-2505.

Email. nicelcg@naver.com.

www.dentalcube.co.kr